
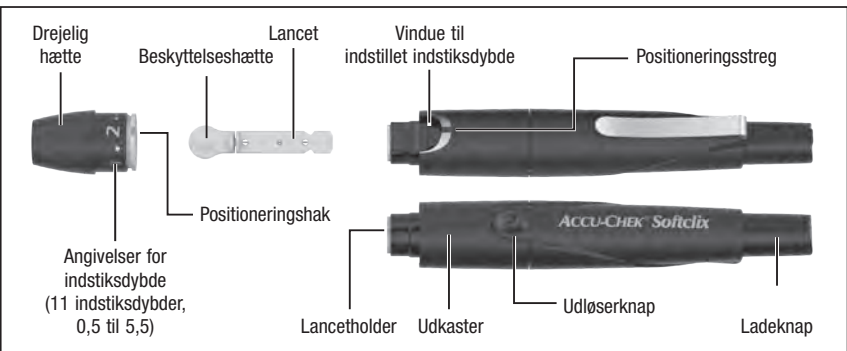


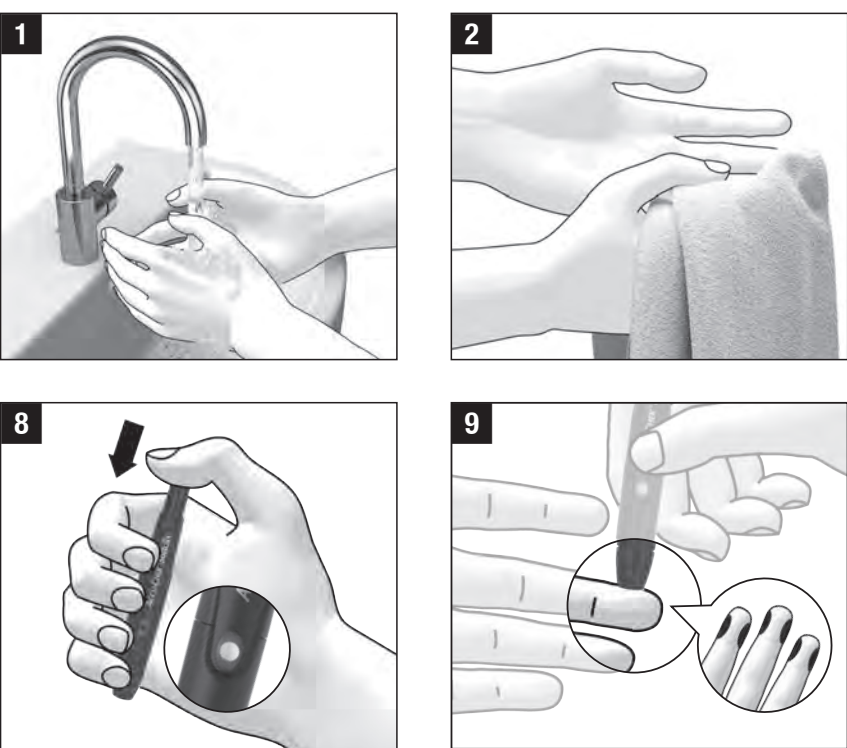

Brugsanvisning

Læs denne brugsanvisning, før du udtager en bloddråbe fra din fingerspids.

Tilsligtet anvendelse

Fingerprikker

Accu-Chek Softclix fingerprikkeren er et udstyr til let og næsten smertefri udtagning af kapillærblod fra fingerspiden. Accu-Chek Softclix fingerprikkeren er udelukkende beregnet til brug på én patient! Med denne må der kun udtages blod fra én og samme person.

Der er risiko for overførsel af infektioner, hvis fingerprikkeren bruges af andre personer, også af familiemedlemmer, eller hvis sundhedspersonale bruger denne fingerprikker til blodudtagning på forskellige personer. Denne fingerprikker er derfor ikke egnet til professionel anvendelse i sundhedsvæsenets institutioner. Den er ikke et sterilt produkt. Målggruppen er personer som gennemfører egenkontrol af diabetes.


Lancet

Accu-Chek Softclix lancetten og Accu-Chek Softclix XL lancetten er sterile enkeltlancetter og er beregnet til brug med Accu-Chek Softclix fingerprikkeren til let og næsten smertefri udtagning af kapillærblod. Lancetten er en engangsdel, som udelukkende er beregnet til engangsbrug. Hver lancet har en beskyttelseshætte, der garanterer sterilitet frem til første brug. Lancetterne er steriliseret med bestråling.

Generelle sikkerhedsoplysninger

Brugsanvisningen indeholder advarsler og forholdsregler:

En **ADVARSEL** angiver en forventelig alvorlig risiko.

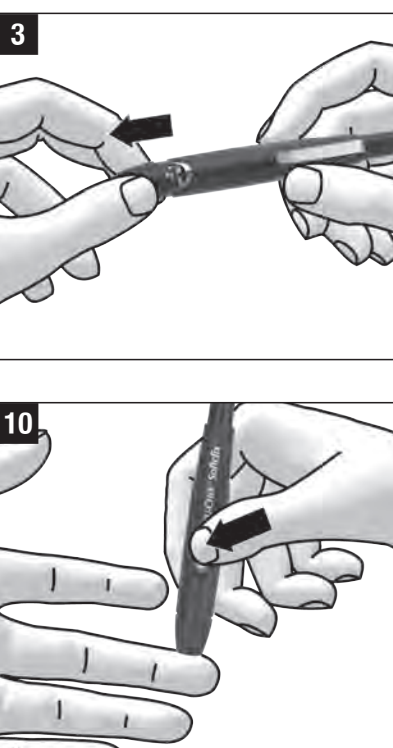

Brug lancetten kun til at udtage en bloddråbe.

- Dele af fingerprikkeren, f.eks. ladeknappen, kan hoppe bort under brug.
- Du må ikke vende fingerprikkeren mod dit ansigt eller mod andre personer.

Isæt udelukkende Accu-Chek Softclix lancetter i Accu-Chek Softclix fingerprikkeren. Andre lancetter kan hæmme fingerprikkerens funktion eller ødelægge fingerprikkeren.

Tips og tricks

Hvis du endnu ikke har erfaring med denne fingerprikker, skal du begynde med en lav indstiksydbyde, f.eks. indstiksydbyde 2.

Når du trykker ladeknappen ned, må du ikke trykke på udleserknappen samtidigt.

Fingerprikkeren er ladt, når udleserknappen er gul i midten.

Generelt kan der udtages blod fra en hvilken som helst finger. Bestemte fingre kan være egnede til det, f.eks. hvis der foregår en infektion af huden eller i en fingernagel. Udgab kapillærblod fra siden af fingerspiden, da det her går mindst ondt.

Hvis der ikke kommer tilstrækkeligt blod, skal du prøve igen med et lidt hårdere tryk. Hvis der stadig ikke er nok blod, skal du trinvis føge indstiksydbyden. Hvis der kommer for meget blod, skal du gøre indstiksydbyden mindre.

Brug af fingerprikkeren


ADVARSEL

Risiko for infektion

- Hvis beskyttelseshætten er beskadiget eller mangler, er nålen muligvis ikke steril og kan medføre infektion.
- Insipier lancetten visuelt. Hvis beskyttelseshætten er bøjet, revnet eller på anden måde beskadiget, må du ikke bruge lancetten. Hvis beskyttelseshætten mangler, eller en del af nålen stikker ud, må du ikke bruge lancetten. Kasser lancetten.
- En brugt lancet kan overføre infektioner.

Du skal bruge lancetten kun én gang til at udtage blod. Efter blodudtagning skal den brugte lancet altid bortkastes.

- I sjældne tilfælde trækkes lancetten ikke ind i fingerprikkeren efter blodudtagning.
- Kontroller, at lancetten ikke stikker ud efter blodudtagning. Hvis lancetten stikker ud, skal hæften fjernes forsigtigt. Skub lancetten ud, og bortkast den.

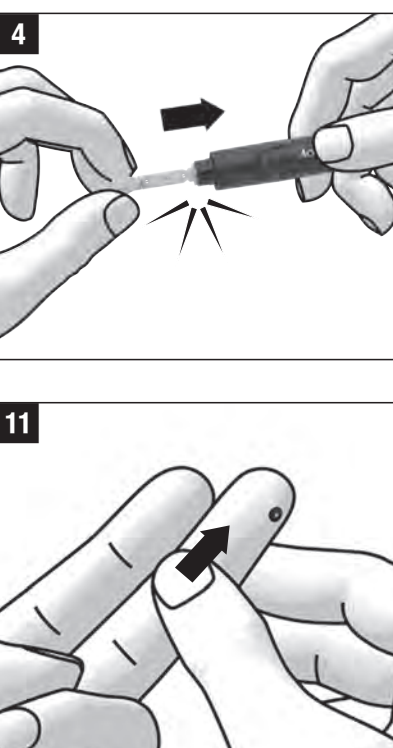

FORHOLDSREGEL

Risiko for infektion

- Et indstiksted, der ikke er rengjort, kan medføre infektion.
- For du udtager blod, skal du rengøre indstikstedet.
- Udløbsdatoen for lancetten er overskredet.
- Brug kun lancetter som ikke har overskredet udløbsdatoen. Udløbsdatoen er trykt på emballagen ved siden af -symbolet.

Følg de instruktioner, der er vist i illustrationerne. Udfør en blodsuktermåling i overensstemmelse med blodsukkerapparatets brugsanvisning umiddelbart efter, at du har udtaget blod.

Brugsbetingelser

Brug fingerprikkeren og tilbehør under følgende brugsbetingelser:

- Temperaturområde: +5 til +45 °C
- Relativ luftfugtighedsområde: 5 til 90 %

Opbevaring af fingerprikkeren og lancetterne

Fingerprikkeren må ikke opbevares i ladt stand. Fingerprikkeren og lancetterne må ikke opbevares under ekstreme temperaturer, f.eks. i en varm bil. Dette kan hæmme fingerprikkerens og lancetternes funktion.

Opbevar kun fingerprikkeren uden isat lancet.

Rengøring og desinficering af fingerprikkeren og hæften

FORHOLDSREGEL

Risiko for infektion

Hvis fingerprikkeren eller hæften har været i kontakt med blod, kan den overføre infektioner.


Du skal altid rengøre og desinficere fingerprikkeren og hæften, før de håndteres af andre, som f.eks. assisterer dig.

For at undgå risikoen for infektionsspredning skal du rengøre og desinficere fingerprikkeren og hæften jævnligt.

- Mindst én gang om ugen.
- Når der er blod på fingerprikkeren eller hæften.
- Altid før en anden person håndterer fingerprikkeren, f.eks. for at assistere dig.

Du skal bruge 3 frugtfrie klude, vand og 70 % isopropanol. Den klud, der bruges til desinficering, skal være stor nok til at pakke fingerprikkeren fuldstændigt ind.

Før du desinficerer fingerprikkeren og hæften, skal de først rengøres for at fjerne blod og andre urenheder.

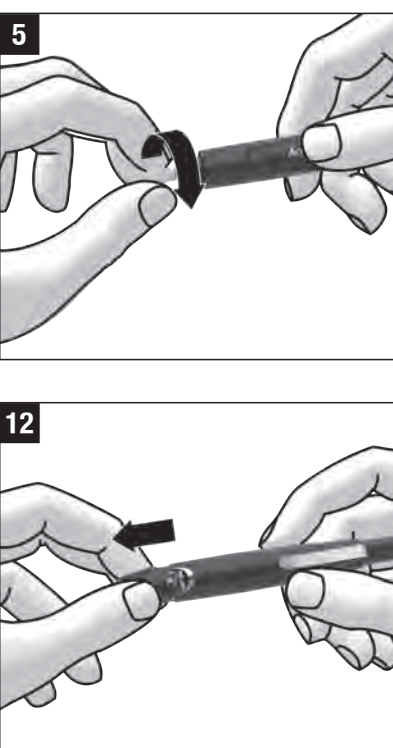

For at undgå at beskadige fingerprikkeren og hæften:

- **Dyp aldrig** fingerprikkeren og hæften i væsker.
- Anvend kun vand til rengøring og kun 70 % isopropanol til desinficering.

- Træk hæften af fingerprikkeren.
- Skub lancetten ud.
- Til rengøring skal den første klud fugtes med vand.
- Efter grundigt fingerprikkeren og hæften med den fugtede klud. Tør kun fingerprikkeren af udvendigt og hæften udvendigt og indvendigt.
- Tør fingerprikkeren og hæften med en anden klud, som er tør.
- Til desinficering skal du fugte en tredje klud med 70 % isopropanol.
- Efter grundigt fingerprikkeren og hæften hver især med kluden med isopropanol i 2 minutter. Tør kun fingerprikkeren af udvendigt og hæften udvendigt og indvendigt.
- Sæt hæften på igen.
- Pak fingerprikkeren fuldstændigt ind i kluden med isopropanol.
- Lad den indpakede fingerprikker ligge i 8 minutter.
- Pak fingerprikkeren ud igen, og lad den lufttørre.

Bortskaffelse af en brugt lancet

ADVARSEL

En brugt lancet kan overføre infektioner.

Nålen på en brugt lancet kan berøres ved et uheld. Lancetten skal derfor bortskaffes på en måde, så ingen skader sig på nålen. Placer f.eks. lancetten i en beholder til skarpe genstande.

Bortskaffelse af fingerprikkeren

FORHOLDSREGEL

Risiko for infektion


Hvis fingerprikkeren har været i kontakt med blod, kan den overføre infektioner.

Bortskaf den brugte fingerprikker som smittefarligt materiale i henhold til lokale bestemmelser.

Bortskaf en ubrugt fingerprikker som plastaffald. Du kan få oplysninger om korrekt bortskaffelse af fingerprikkeren hos din kommune eller lokale myndighed.

Bestillingsoplysninger

Du bedes kontakte kundeservice, hvis du ønsker at bestille et af Accu-Chek Softclix produkterne (se afsnittet *Kundeservice*).

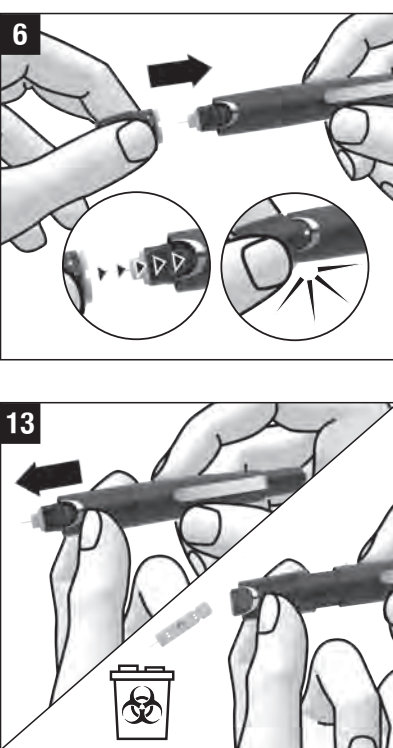

Rapportering af alvorlige hændelser

Patienter/brugere/tredjeparter i EU og i lande med identisk reguleringsordning skal rapportere tilfælde af alvorlige hændelser under anvendelsen af dette udstyr eller som konsekvens af anvendelse til producenten og til den relevante nationale myndighed.


Seneste opdatering

2022-02

Kundeservice

Danmark

Accu-Chek Kundeservice:
Tlf. 80 82 84 71
www.accu-chek.dk

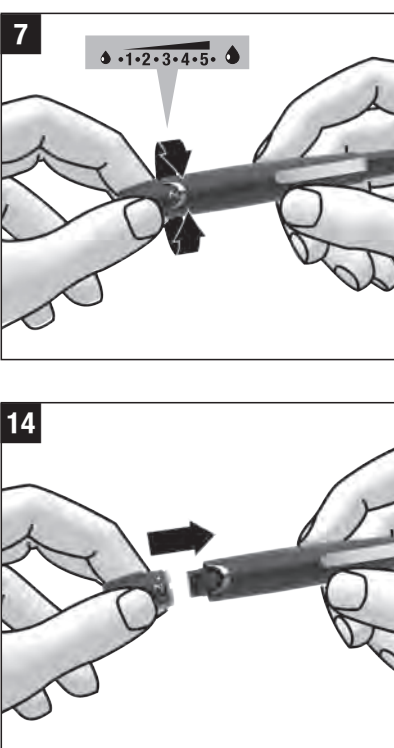

DA NO SV FI

Accu-Chek®
Softclix

Fingerprikker og lancet

Blodprøvetaker og lansett

Blodprovstagare och lansett

Lansettikynä ja lansetti


DE 09721959001(01) – US 09721959001A



	Se brugsanvisningen eller den elektroniske brugsanvisning
	Forsigtig, læs sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen, der følger med dette produkt.
	Holdbar til
STERILE R	Steriliseret med bestråling
	Må kun anvendes én gang
	Enkelt patient – flegangsbrug
	Vask hænderne
	Produktionsdato
MD	Medicinsk udstyr
	Producent
UDI	Unik udstyrsidentifikationskode
REF	Katalognummer
LOT	Batchkode
	Overholder bestemmelserne i den gældende EU-lovgivning

CE 0123

ACCU-CHEK og SOFTCLIX er varemærker tilhørende Roche.
© 2022 Roche Diabetes Care
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

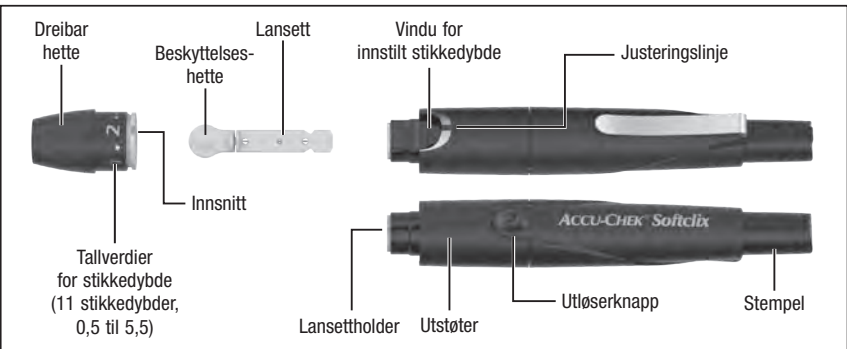

Bruksanvisning

Læs denne brugsanvisning før du tar en blodprøve fra fingertuppen.

Bruksområde

Blodprøvetaker

Accu-Chek Softclix-blodprøvetakeren er et redskap for å ta kapillærblod fra fingertuppene på en enkel og næsten smertefri måte. Accu-Chek Softclix-blodprøvetakeren er kun beregnet til bruk på én pasient! Med den er det kun tillatt å ta blodprøve fra den samme personen.

Det oppstår infeksjonsfare hvis blodprøvetakeren også brukes av andre personer, også av familiemedlemmer, eller hvis helsepersonell bruker den samme blodprøvetakeren til å ta blodprøve av mer enn én person. Denne blodprøvetakeren er derfor ikke egnet til profesjonell bruk innen helsevesenet. Den er ikke et sterilt produkt. Målggruppen er personer som utfører egenkontroll av diabetes.

Lansett

Accu-Chek Softclix-lansetten og Accu-Chek Softclix XL-lansetten er enkle sterile lansetter og er beregnet til bruk med Accu-Chek Softclix-blodprøvetakeren for å ta kapillærblod på en enkel og nærmest smertefri måte. Lansetten er en engangsdel som er beregnet til engangsbruk.

Hver lansett er utrustet med en beskyttelseshette som garanterer sterile betingelser for første gangs bruk. Lansettene er sterilisert med stråling.

Generell sikkerhetsinformasjon

Brugsanvisningen inneholder advarsler og forholdsregler.

En **ADVARSEL** viser til en forventelig alvorlig risiko. En **FORHOLDSREGEL** beskriver et tiltak du bør ta for å bruke produktet sikkert og effektivt eller for å forhindre skade på produktet.

- Deler av blodprøvetakeren, for eksempel stempelen, kan hoppe bort under bruk.
- Ikke pek blodprøvetakeren mot ansiktet ditt eller mot andre personer.

Bruk kun Accu-Chek Softclix-lansetter i Accu-Chek Softclix-blodprøvetakeren. Andre lansetter kan påvirke blodprøvetakerens funksjon eller ødelegge blodprøvetakeren.

Tips og triks

Dersom du ikke har erfaring med denne blodprøvetakeren ennå, kan du starte med å stille inn en lav stiksydbyde, f.eks. stiksydbyde 2.

Når du trykker inn stempelen, må du ikke trykke inn utløserknappen samtidig.

Blodprøvetakeren er klargjort når du ser en gul prik midt i utløserknappen.

Vanligvis kan man ta blodprøver fra hver finger. Fingre kan også være uegnet når det f.eks. foreligger en hudinfeksjon eller infeksjon av en fingernagel. Ta kapillærblod fra sidene av fingertuppene, da det gjør mindre vondt på disse stedene.

Hvis du ikke får ut tilstrekkelig med blod ska du trykke blodprøvetakeren i tillegg. Får du ut for mye blod, reduserer du stiksydbyden.

Bruke blodprøvetakeren

ADVARSEL

Infeksjonsfare

- Hvis beskyttelseshætten er skadet eller mangler, kan det hende nålen er usteril, noe som kan føre til infeksjon.
- Insipier lansetten visuelt. Hvis beskyttelseshætten er deformert, sprukket eller skadet på annen måte, må du ikke bruke lansetten. Hvis beskyttelseshætten mangler eller noen del av nålen er eksponert, må du ikke bruke lansetten. Kast lansetten.
- En brukte lansett kan overføre infeksjoner.

En lansett må kun brukes én gang til å ta blodprøve. Kast alltid den brukte lansetten når blodprøven er tatt.

- I sjeldne tilfeller trekkes lansetten ikke tilbake i blodprøvetakeren etter blodprøvetaking.
- Kontroller at lansetten ikke stikker ut etter at du har tatt blodprøven. Hvis lansetten stikker ut, må du fjerne hetten forsiktig. Utsatt og kast lansetten.

FORHOLDSREGEL

Infeksjonsfare

- Et innstiksted som ikke er rengjort kan føre til infeksjon.

Rengjør innstikstedet før blodprøvetaking.

- Lansettens utløpsdato er overskredet.

Bruk kun lansetter som ikke har nådd utløpsdatoen. Utløpsdatoen er trykket ved siden av -symbolet på emballasjen.

Bruksforhold

Bruk blodprøvetakeren inkludert tilbehør ved følgende bruksforhold:

- Temperaturområde: +5 til +45 °C
- Relativt luftfuktighetsområde: 5 til 90 %

Opbevare blodprøvetakeren og lansettene

Ikke opbevare blodprøvetakeren i klargjort tilstand. Ikke opbevare blodprøvetakeren og lansettene ved ekstreme temperaturer, f.eks. i en varm bil. Dette kan påvirke blodprøvetakerens og lansettens funksjon.

Opbevare blodprøvetakeren kun uten innsett lansett.

Rengjøre og desinfisere blodprøvetakeren og hetten

FORHOLDSREGEL

Infeksjonsfare

Hvis blodprøvetakeren eller hetten har kommet i kontakt med blod, kan den overføre infeksjoner.

Du må alltid rengjøre og desinfisere blodprøvetakeren og hetten før noen annen bruker den, f.eks. for å hjelpe deg.

For å hindre overføring av infeksjoner må du rengjøre og desinfisere blodprøvetakeren og hetten regelmessig:

- minst én gang per uke.
- når det er blod på blodprøvetakeren eller hetten.
- alltid før noen annen tar i blodprøvetakeren, f.eks. for å hjelpe deg.

Du trenger 3 fofrie kluter, vann og 70 % isopropanol. Kluten som brukes til desinficering, må være stor nok til å pakke blodprøvetakeren inn i.

Før du desinfiserer blodprøvetakeren og hetten, må du først rengjøre dem for å fjerne blod og andre tilsusninger.

For ikke å skade blodprøvetakeren og hetten:

- **Dyp aldri** blodprøvetakeren og hetten ned i væskene.
- Bruk kun vann til rengjøring og kun 70 % isopropanol til å desinfisere.

- Trekk hetten av blodprøvetakeren.
- Støt ut lansetten.
- For rengjøring fukter du den første kluten med vann.
- Tørk av blodprøvetakeren og hetten nøy med den fuktige kluten. Rengjør blodprøvetakeren kun på utsiden og hetten på utsiden og innsiden.
- Tørk av blodprøvetakeren og hetten med en ny, tørr klud.
- For desinfisering fukter du den tredje kluten med 70 % isopropanol.
- Rengjør både blodprøvetakeren og hetten grundig med isopropanolkluten i 2 minutter hver. Rengjør blodprøvetakeren kun på utsiden og hetten på utsiden og innsiden.
- Sett hetten på igjen.
- Pakk blodprøvetakeren helt inn i isopropanolkluten.
- La den innpakede blodprøvetakeren ligge i 8 minutter.
- Pakk blodprøvetakeren ut igjen og la den lufttørke.

Kaste en brukte lansett

ADVARSEL

En brukte lansett kan overføre infeksjoner.

Det er fare for at nålen til en brukte lansett kan berøres utilsiktet. Derfor må du kaste lansetten på en måte som gjør at den ikke påfører noen skade. Plasser f.eks. lansetten i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander.

Kaste blodprøvetakeren

FORHOLDSREGEL

Infeksjonsfare

Hvis blodprøvetakeren har kommet i kontakt med blod, kan den overføre infeksjoner.

Du må kaste den brukte blodprøvetakeren som smittsomt materiale i samsvar med lokale forskrifter.

Kast ubrukte blodprøvetakere som plastavfall.

Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om riktig avhending av blodprøvetakeren.

Bestillingsinformasjon

Kontakt kundesenteret (se avsnittet *Kundesenter*) hvis du ønsker å bestille Accu-Chek Softclix-produkter.

Rapportering av alvorlige hendelser

For en pasient/bruker/tredjepart i EU og i land med identisk lovgivning: Hvis det under bruk av dette utstyret eller som følge av slik bruk har oppstått en alvorlig hendelse, skal dette rapporteres til produsenten og til nasjonale myndigheter.

Sist oppdatert

2022-02

Kundesenter

Norge

Accu-Chek Kundesenter: 21 400 100
www.accu-chek.no

Se bruksanvisningen eller den elektroniske bruksanvisning



Forsiktig, les sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen som følger med dette produktet.

Utløpsdato

STERILE R

Sterilisert med stråling

Kun til engangsbruk

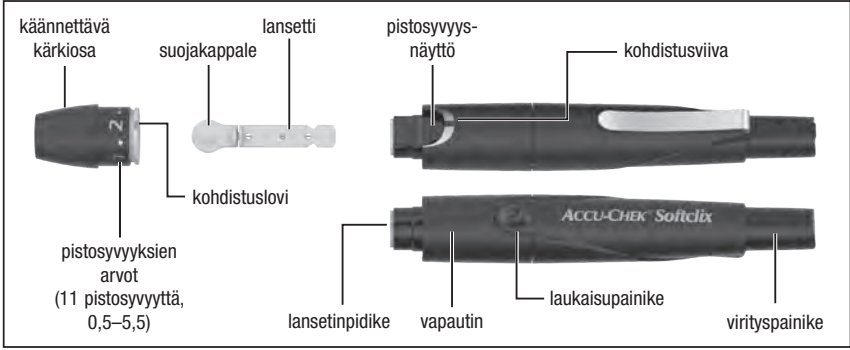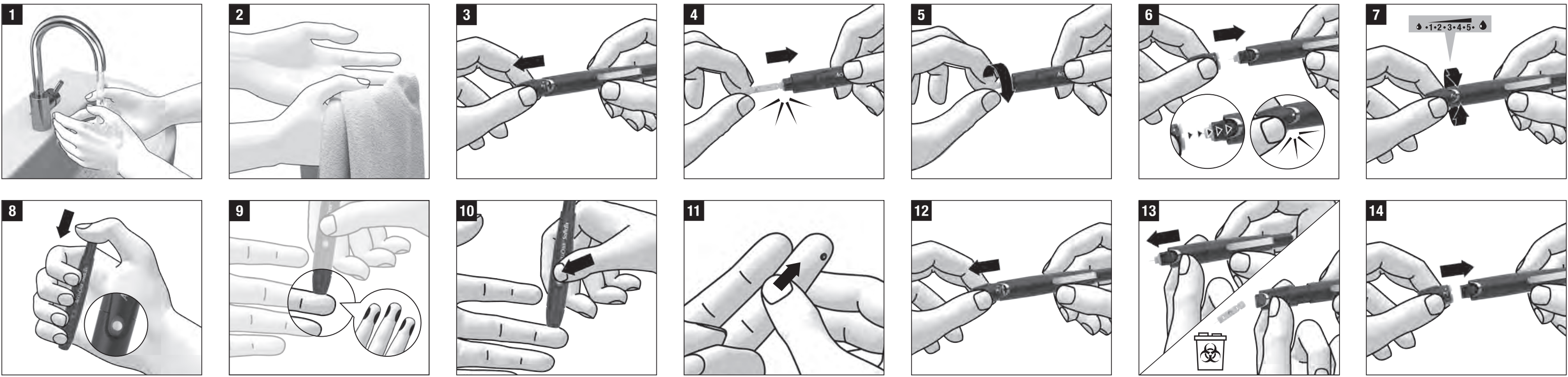

Käyttöohje

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin otat verinäytteen sormenpäästä.

Käyttötarkoitus

Lansettikynä

Accu-Chek Softclix -lansettikynä on tarkoitettu kapillaariverinäytteen ottamiseen sormenpäästä helposti ja lähes kivuttomasti. Accu-Chek Softclix -lansettikynä on tarkoitettu vain potilaan henkilökohtaiseen käyttöön! Sitä saa käyttää vain yhden henkilön verinäytteiden ottoon.

Jos toinen henkilö, perheenjäsenet mukaan luettuna, käyttää lansettikynää tai jos terveydenhuollon ammattilainen käyttää samaa lansettikynää verinäytteen ottoon useammilta henkilöiltä, on olemassa infektioiden leviämisen riski. Tämän lansettikynä ei siksi sovelu ammattikäyttöön terveydenhuollon laitoksissa. Se ei ole steriili tuote. Kohderyhmään kuuluvat diabeteksen omaseuranta toteuttavat henkilöt.

Lansetti

Accu-Chek Softclix -lansetti ja Accu-Chek Softclix XL -lansetti ovat steriilejä yksittäisiä lansetteja, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Accu-Chek Softclix -lansettikynän kanssa kapillaariverinäytteen ottamiseen helposti ja lähes kivuttomasti. Lansetti on kertakäyttötuote, joka on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran.

Jokaisessa lansetissa on suojakappale, joka takaa lansetin steriiliyden ennen ensimmäistä käyttöä. Lansetti on steriloitu säilyttämällä.

Yleistä tietoa turvallisuudesta

Käyttöohje sisältää varoituksia ja tietoa varoitoimenpiteistä:

VAARA osoittaa, että tilanteeseen voi liittyä vakava vaara.

- Jos lansetti isketään kovaa pintaa vasten, neula voi vaurioitua. Käytä lansettia vain veripisaran ottamiseen.
- Lansettikynää käytettäessä sen osat (esim. virityspainike) voivat työntyä ulospäin. Älä suuntaa lansettikynää omia kasvojasi tai muita ihmisiä kohti.

Käytä Accu-Chek Softclix -lansettikynässä vain Accu-Chek Softclix -lansetteja. Muut lansetit voivat aiheuttaa lansettikynässä toimintahäiriötä tai vaurioittaa sitä pysyvästi.

Vinkkejä ja ohjeita

Jos et ole käyttänyt tätä lansettikynää aikaisemmin, aloita pienellä pistosvyyvedellä, esim. 2:lla.

Kun painat virityspainiketta, älä paina laukaisupainiketta samanaikaisesti.

Lansettikynä on viritetty, kun laukaisupainikkeessa näkyy keltainen piste.

Verinäyte voidaan ottaa periaatteessa mistä sormesta tahansa. Sormi, jonka ihossa tai kynnessä on infekto, ei sovellu verinäytteen ottoon. Ota kapillaariverinäyte sormenpään sivulta, sillä näissä pistoskohdissa kiputuntemus on vähäisintä.

Jos verta ei tule riittävästi, paina lansettikynää napakammin ihoa vasten seuraavan verinäytteen oton yhteydessä. Jos verta ei edelleenkään tule riittävästi, suurena myös pistosvyytyä asteittain. Jos verta tulee liikaa, pienennä pistosvyytyä.

Lansettikynän käyttö

VAARA

Infektioriski

- Jos suojakappale on vaurioitunut tai puuttuu, neula voi olla epästeriili ja aiheuttaa infektion. Tarkasta lansetti silmämääräisesti. Jos suojakappale on vääntynyt, hajennut tai muuten vaurioitunut, älä käytä lansettia. Jos suojakappale puuttuu tai jokin neulan osa on työntynyt esin, älä käytä lansettia. Hävitä lansetti.
- Käytetty lansetti voi levittää infektiota. Käytä lansettia vain kerran verinäytteen ottoon. Hävitä käytetty lansetti aina verinäytteen oton jälkeen.
- Harvoissa tapauksissa lansetti ei vetäydy takaisin lansettikynään verinäytteen ottamisen jälkeen. Tarkista, ettei lansetti työnny ulos verinäytteen ottamisen jälkeen. Jos lansetti työnnyt ulos, poista suojakappale varovasti. Poista ja hävitä lansetti.

VAROTOIMENPIDE

Infektioriski

- Pistoskohdan puhdistamatta jättäminen voi johtaa infektiin. Puhdista pistoskohta ennen kuin otat verinäytteen.
- Lansetin viimeinen käyttöpäivämäärä on kulunut umpeen.

Käytä vain lansetteja, joiden viimeinen käyttöpäivämäärä ei ole vielä kulunut umpeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen symbolin viereen.

Noudata kuvissa näkyviä ohjeita. Mittaa verensokeri heti verinäytteen oton jälkeen verensokerimittarisi käyttöohjeen mukaisesti.

Käyttöolosuhteet

Käytä lansettikynää ja tarvikkeita seuraavissa käyttöolosuhteissa:

- Lämpötila-alue: +5 – +45 °C
- Suhteellinen kosteusalue: 5–90 %

Lansettikynän ja lansettien säilytys

Älä säilytä lansettikynää viritettynä. Älä säilytä lansettikynää ja lansetteja äärimmäisissä lämpötiloissa, kuten kuumassa autossa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriötä lansettikynässä tai lanseteissa.

Säilytä lansettikynää aina ilman lansettia.

Lansettikynän ja kärkiosan puhdistus ja desinfiointi

VAROTOIMENPIDE

Infektioriski

Jos lansettikynä tai kärkiosa on ollut kosketuksissa vereen, se voi levittää infektiota.

Puhdista ja desinfiointi lansettikynä ja kärkiosa aina ennen kuin joku muu käsittelee niitä esim. auttaessaan sinua.

Infektioiden leviämisen välttämiseksi lansettikynä ja kärkiosa on puhdistettava ja desinfiointava säännöllisesti

- vähintään kerran viikossa
- Jos lansettikynä tai kärkiosa on tahriintunut vereen
- aina ennen kuin toinen henkilö koskettaa lansettikynää esim. auttaessaan sinua.

Tarvitset 3 nukkaamatonta liinaa, vettä ja 70-prosenttista isopropanolia. Desinfiointiin käytettävän liinan on oltava riittävän suuri, jotta lansettikynä voidaan kääriä sen sisään.

Veren ja epäpuhtauksien poistamiseksi lansettikynä ja kärkiosa on puhdistettava ennen desinfiointia.

Lansettikynän ja kärkiosan vahingoittumisen välttämiseksi

- **Älä** upota lansettikynää ja kärkiosaa nesteeseen
- Käytä puhdistuksessa vain vettä ja desinfiointissa vain 70-prosenttista isopropanolia.

- Vedä lansettikynän kärkiosa irti.
- Poista lansetti.
- Kostuta ensimmäinen liina vedellä puhdistusta varten.

- Pyyhi lansettikynä ja kärkiosa huolellisesti kostealla liinalla. Pyyhi lansettikynää vain ulkopuolelta ja kärkiosaa ulko- ja sisäpuolelta.

- Kuivaa lansettikynä ja kärkiosa toisella, kuivalla liinalla.

- Kostuta kolmas liina desinfiointia varten 70-prosenttisella isopropanolilla.

- Pyyhi sekä lansettikynää että kärkiosaa 2 minuutin ajan perusteellisesti isopropanolilla kostutetulla liinalla. Pyyhi lansettikynää vain ulkopuolelta ja kärkiosaa ulko- ja sisäpuolelta.

- Aseta kärkiosa takaisin paikalleen.
- Kääri lansettikynä kokonaan isopropanolilla kostutetun liinan sisään.

- Anna lansettikynän olla liinaan käärittynä 8 minuutin ajan.

- Ota lansettikynä pois kääreestä ja anna sen kuivua ilmavassa paikassa.

Käytetyn lansetin hävittäminen

VAARA

Infektioriski

Käytetty lansetti voi levittää infektiota.

Käytetyn lansetin neulaa voidaan koskettaa vahingossa. Hävitä lansetti siksi siten, ettei lansetti aiheuta kenellekään vammoja. Laita lansetti esimerkiksi riskijäteastiaan.

Lansettikynän hävittäminen

VAROTOIMENPIDE

Infektioriski

Jos lansettikynä on ollut kosketuksissa vereen, se voi levittää infektiota.

Hävitä käytetty lansettikynä tartuntavaarallisenä materiaalina maassasi voimassa olevien määräysten mukaan.

Hävitä käyttämätön lansettikynä muovijätteenä. Lisätietoa lansettikynän oikeasta hävittämisestä saat paikalliselta viranomaiselta.

FI

Accu-Chek®
Softclix

Lansettikynä ja lansetti

Katso käyttöohjetta tai katso sähköistä käyttöohjetta

Vaara, tutustukaa tuotteen käyttöohjeessa oleviin turvallisuuteen liittyviin huomautuksiin.

Käytettävä viimeistään

Steriiloi säilyttämällä

Käytä vain kerran

Potilaskohtainen – voidaan käyttää useita kertoja

Pese kädet

Valmistusajankohta

Lääkinnällinen laite

Valmistaja

Yksilöllinen laitetunniste

Tuotenumero

Eräkoodi

Sovellettavan EU-lainsäädännön mukainen

CE

0123

ACCUCHEK ja SOFTCLIX ovat Roche'n tavaramerkkejä.

© 2022 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

Roche

DE 09721959001(01) – US 09721959001A